lopital®
If caregivers have a choice

Sirocco

Sanftes, sicheres und zuverlässiges Duschen

6100 2500 / 6100 2505

Sirocco Basic Duschliege

Der Sirocco Basic 6100 2500 verbindet eine unkomplizierte, höhenverstellbare Konstruktion mit einer benutzerfreundlichen Bedienung und eignet sich damit hervorragend für den täglichen Einsatz in Pflegeeinrichtungen. Dank des elektrisch betriebenen Hubsystems und des intuitiven Handschalters kann das Pflegepersonal die Liege auf die optimale Arbeitshöhe einstellen. Dadurch wird die körperliche Belastung reduziert und der zu pflegenden Person ein angenehmeres Duscherlebnis ermöglicht.


Für Einrichtungen, die eine einfachere Lösung suchen, bietet der Sirocco Basic 6100 2505 eine Ausführung mit fester Höhe, die dieselbe robuste Qualität und denselben Komfort für die zu pflegende Person gewährleistet. Dieses Modell eignet sich besonders für Einsatzbereiche, in denen die Höhenverstellung weniger wichtig ist, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit jedoch weiterhin entscheidend sind. Beide Ausführungen des Sirocco Basic bestehen aus denselben hochwertigen Materialien und sind mit einer weichen, stützenden Matratze ausgestattet, die Sicherheit und Komfort bei der täglichen Pflege gewährleistet.

Klappbar & funktional. Die Sirocco Duschliege lässt sich platzsparend hochklappen und spart so wertvolle Bodenfläche, ohne dabei an Stabilität und Funktionalität einzubüßen.

Ergonomische Bedienung. Die höhenverstellbare Konstruktion und die stufenlose Positionierung reduzieren die körperliche Belastung und ermöglichen eine komfortable und effiziente Pflege in jeder Höhe.

Zuverlässig & langlebig. Entwickelt für den täglichen Pflegeeinsatz und abgesichert durch eine 60-monatige Garantie – für zuverlässige Leistung, auf die man sich verlassen kann.

Antibakteriell & korrosionsbeständig. Die antibakterielle Beschichtung auf Basis von Silberionen unterstützt die Hygiene und Infektionsprävention, während das korrosionsbeständige Gestell mit glatten Oberflächen für Langlebigkeit und eine einfache Reinigung sorgt.

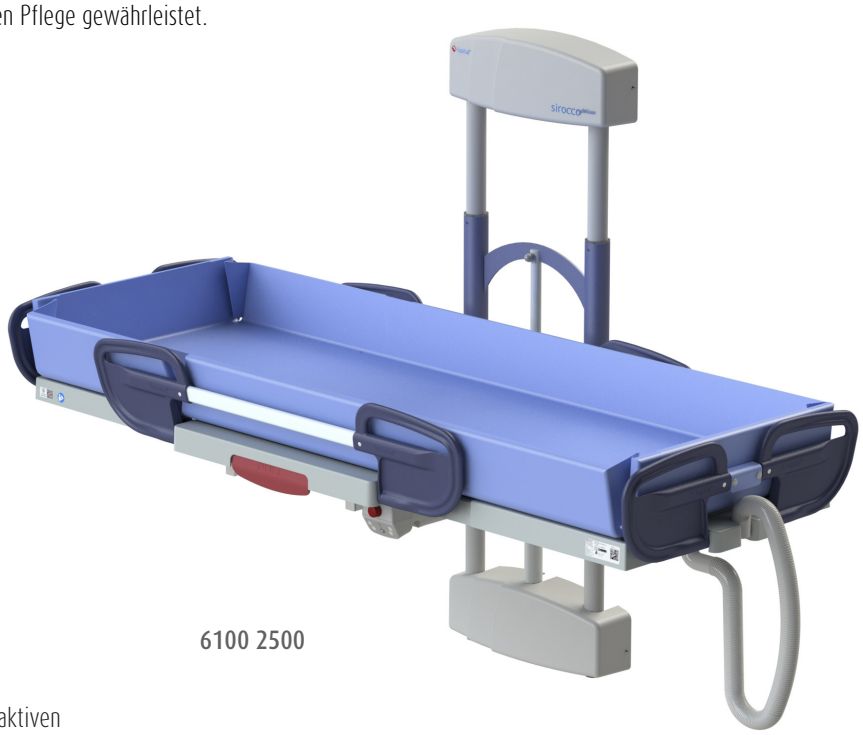


6100 2500

Entdecken Sie unsere Produkte in Aktion – mit den interaktiven Produktvideos auf unserer Website: www.lopital.de

Technische Daten

Hubantrieb	Elektrisch (nur 6100 2500)
Handschalter	Vier-Tasten-Handschalter mit Aufhängehaken, Schutzart IPX6
Steuereinheit	24 V DC, max. 250 W, IPX6
Akkueinheit	24 V, 2.9 Ah, IPX6
Ladegerät	100-240 V AC, 50-60 Hz, max. 1 A, Wandladegerät

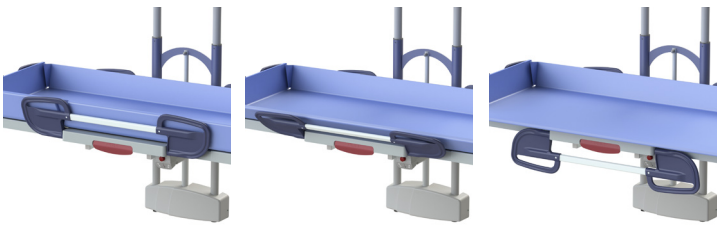





Geeignet für Personen mit stark eingeschränkter bis sehr stark eingeschränkter Mobilität

6100 2505

Sirocco Basic Duschliege mit fester Höhe

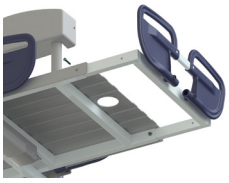

Mit integrierter Längenverstellung.

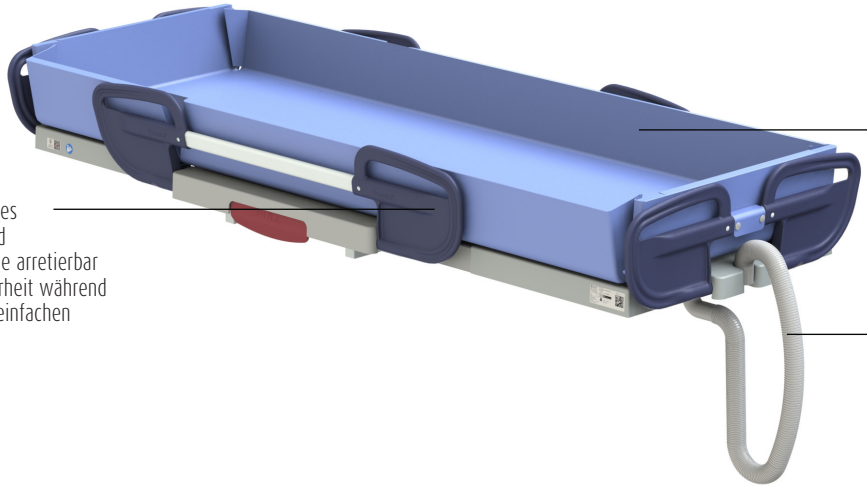

Soft-Touch-Matratze. Besonders komfortabel, weich und mit einer rutschhemmenden Beschichtung ausgestattet

Sicheres und praktisches Seitengitter. Hoch- und herunterklappbar sowie arretierbar – für zusätzliche Sicherheit während der Pflege und einen einfachen Zugang bei Transfers

Flexibler Ablaufschlauch zum kontrollierten Ableiten des Spülwassers, geeignet für den täglichen Gebrauch




70205004
Handschalter mit Batterieanzeige



70205003
Batteriekasten

Optional

70200034 Kissen
(Bei den Basismodellen ist ein Kissen im Lieferumfang enthalten).

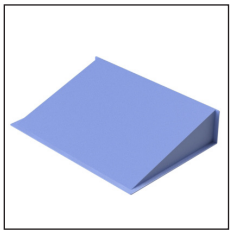

Produktnr.	Produktbeschreibung	Außenlänge	Äußere Tiefe	Außenbreite	Innenbreite	Höhenverstellung der Liegefläche	Max. Hebegewicht	Produktgewicht
6100 2500	Sirocco Basic Duschliege	186 206	93	170 – 190	70 – 93	45 – 95	227 kg	75 kg
6100 2505	Sirocco Basic Duschliege mit fester Höhe	186 206	93	170 – 190	70 – 93	–	150 kg	71 kg
6100 2510	Sirocco Deluxe Duschliege	186 206	93	170 – 190	70 – 93	45 – 95	227 kg	75 kg
6720 0005	Matratze Basic 186 cm	–	–	170	70	–	–	–
6720 0010	Matratze Basic 206 cm	–	–	190	70	–	–	–
6720 0015	Matratze Deluxe 186 cm	–	–	170	70	–	–	–
6720 0020	Matratze Deluxe 206 cm	–	–	190	70	–	–	–

*Alle Maße in dieser Tabelle sind in Zentimetern angegeben.

lopital®
If caregivers have a choice

6100 2510
Sirocco Deluxe Duschliege

Der Sirocco Deluxe baut auf den Vorteilen der Sirocco-Basic-Modelle auf und bietet zusätzliche Funktionen für mehr Flexibilität. Die stufenlose elektrische Rückenlehnenverstellung ermöglicht eine komfortablere Positionierung der zu pflegenden Person und unterstützt sowohl die Entspannung als auch einen effizienten Pflegeablauf. Diese Funktion ist besonders bei längeren Waschvorgängen von Vorteil, da unterschiedliche Positionen den Komfort erhöhen und die Arbeitsbelastung des Pflegepersonals reduzieren.


Dank seiner präzisen Handhabung und leichtgängigen Bedienung eignet sich der Sirocco Deluxe für Pflegeumgebungen, in denen Flexibilität und der Komfort der zu pflegenden Person höchste Priorität haben. Er verbindet Zuverlässigkeit mit durchdachten Funktionen, die das Pflegepersonal dabei unterstützen, täglich eine sichere, würdevolle und effiziente Körperpflege zu gewährleisten.



Eingeklappte Position



Demontage der Liegeplatte und der Matratze

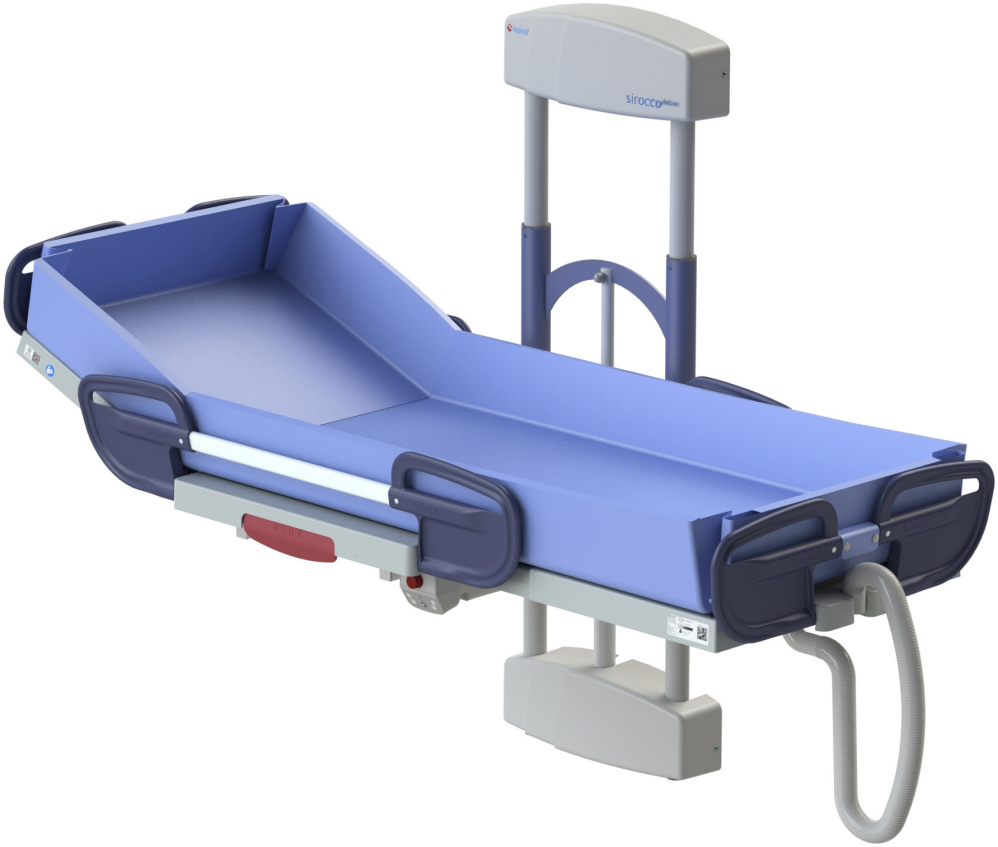

Entdecken Sie unsere Produkte in Aktion – mit den interaktiven Produktvideos auf unserer Website: www.lopital.de

Technische Daten


Hubantrieb	Elektrisch
Handschalter	Vier-Tasten-Handschalter mit Aufhängehaken, Schutzart IPX6
Steuereinheit	24 V DC, max. 250 W, IPX6
Akkueinheit	24 V, 2.9 Ah, IPX6
Ladegerät	100–240 V AC, 50–60 Hz, max. 1 A, Wandladegerät
Rückenlehnenverstellung	bis zu 25 Grad



Geeignet für Personen mit stark eingeschränkter bis sehr stark eingeschränkter Mobilität

Flammhemmend gemäß M2-Norm.
Erfüllt die Brandschutzanforderungen der Klasse M2 und bietet zusätzlichen Schutz in professionellen Pflegeumgebungen.

Soft-Touch-Matratze.
Besonders komfortabel, angenehm weich und mit einer rutschhemmenden Beschichtung für zusätzliche Sicherheit ausgestattet.

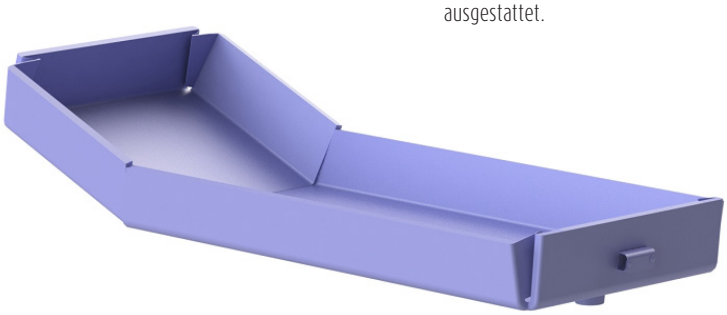

Hohe Kratzfestigkeit.
Die langlebige Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Abnutzung und bewahrt langfristig ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild.


Antibakteriell.
Durch den Zusatz von Silberionen wirkt die Matratze antibakteriell.


REACH-konform und cadmiumfrei.
Gemäß den REACH-Anforderungen hergestellt und frei von Cadmium – für eine sicherere und umweltbewusste Nutzung.


Sichere und hautfreundliche Matratze.
Frei von Schadstoffen wie Phthalaten – ideal für empfindliche Haut und den sicheren täglichen Gebrauch.

Langlebige, mehrschichtige Matratze.
Besteht aus vier PVC-Schichten für höheren Komfort, lang anhaltende Unterstützung sowie eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Abnutzung.


6100 2500

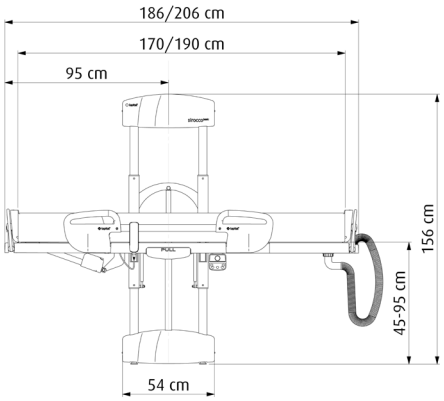

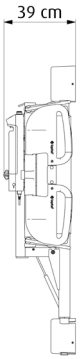


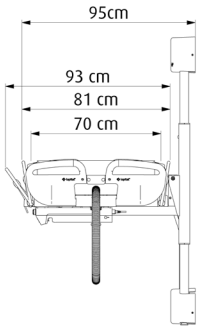


6100 2510

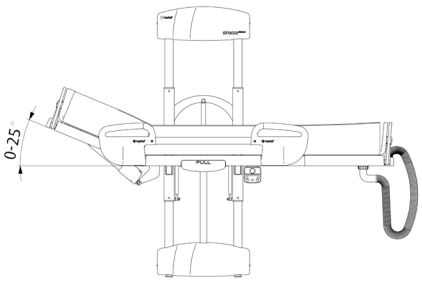

6100 2505

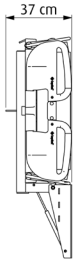

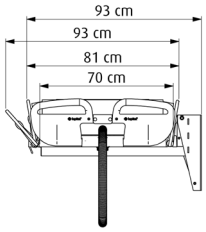

Green Deal

ISO CERTIFIED 9001 - 13485 - 14001

MADE IN THE NETHERLANDS

Scan for information

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.lopital.de
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-Mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

LFT2500-2026-01 DE

Alle von Lopital hergestellten Hilfsmittel entsprechen den geltenden Normen für Medizinprodukte der Klasse I (MDR (EU) 2017/745).

Copyright ©2026 Lopital. All rights reserved.