

Reflex XXL

Pflege stärken – ohne Grenzen

5100 5900

Reflex XXL Dusch-Toilettenstuhl

Der Reflex XXL überträgt das bewährte Konzept des Reflex auf die Anforderungen einer höheren Belastbarkeit. Ergänzt wird es durch ergonomische Einstellmöglichkeiten, die speziell für die bariatrische Pflege entwickelt wurden. Die höhenverstellbare Rückenlehne und die breitenverstellbaren Armlehnen bieten individuelle Unterstützung für unterschiedliche Körperformen. Die Armlehnen lassen sich sicher arretieren und per Knopfdruck mühelos entriegeln. Dies ermöglicht reibungslose und kontrollierte Transfers. Mit seinem robusten Edelstahlrahmen, seiner hohen Stabilität und dem leistungsstarken elektrischen Antrieb bietet der Reflex XXL Personen mit höherem Körpergewicht kompromisslosen Komfort, maximale Sicherheit und ein hohes Maß an Vertrauen bei der Nutzung.

Der Reflex XXL wurde speziell für anspruchsvolle Pflegeumgebungen entwickelt und vereint Zuverlässigkeit, Komfort und fortschrittliche Funktionen in einer langlebigen Lösung. Die gleichmäßige, synchronisierte Höhen- und Neigungsverstellung ermöglicht eine präzise Positionierung. Eine negative Neigung nach vorne unterstützt dabei intuitiv das Aufstehen. Mit seinem großzügigen Platzangebot und seiner hohen Tragfähigkeit ermöglicht der Reflex XXL eine sichere, würdevolle und effiziente Pflege – sowohl für die zu pflegende Person als auch für das Pflegepersonal.

Individuell anpassbare Unterstützung.

Die höhenverstellbare Rückenlehne und die breitenverstellbaren Armlehnen bieten optimalen Halt für unterschiedliche Körperformen. Die Armlehnen lassen sich sicher arretieren und per Knopfdruck entriegeln. Dies ermöglicht einen einfachen und kontrollierten Transfer.

Zuverlässig & Langlebig. Entwickelt für den täglichen Pflegeeinsatz und abgesichert durch eine 60-monatige Garantie – für zuverlässige Leistung, auf die man sich verlassen kann.


Antibakteriell & Korrosionsbeständig. Die antibakterielle Beschichtung auf Basis von Silberionen unterstützt die Hygiene und Infektionsprävention, während das korrosionsbeständige Gestell mit glatten Oberflächen für Langlebigkeit und eine einfache Reinigung sorgt.

Unterstützende Kippfunktion. Dank der negativen Sitzneigung bietet der Reflex XXL eine effektive Aufstehunterstützung. Dies fördert die Selbstständigkeit des Klienten und reduziert gleichzeitig die körperliche Belastung der Pflegekraft.



Technische Daten

Max. Hebegewicht	275 kg
Produktgewicht	70 kg
Sitzbreite (verstellbar)	70 – 80 cm
Sitztiefe	53 cm
Sitzhöhe (verstellbar)	45 – 76 cm

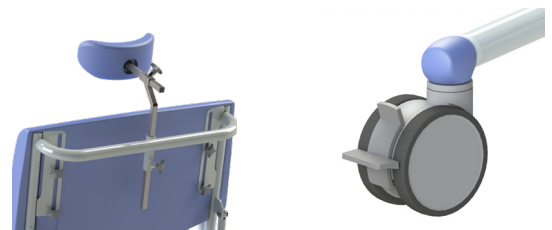

Kopf-/Nackenstütze.

3 Lenkrollen und 1 Richtungsrolle, jeweils mit Einzelbremse.



Geeignet für Menschen mit mäßig eingeschränkter bis stark eingeschränkter Mobilität

Entdecken Sie unsere Produkte in Aktion – mit den interaktiven Produktvideos auf unserer Website: www.lopital.de

5100 5900

Reflex XXL Dusch-Toilettenstuhl

Optional

6950 1104

Bettpfanne mit
Deckel Kunststoff.

Höhenverstellbare
Rückenlehne für
individuellen Komfort
und Stabilität

Höhenverstellbare,
um 30° nach außen
schwenkbare
Fußstütze (Linie
an der Fußstütze
platzieren)

Robustes und stabiles
Fahrgestell für
maximale Sicherheit
und Unterstützung

3 Lenkrollen und 1
Richtungsrolle, jeweils
mit Einzelbremse

Hochklappbare
Armlehnen mit Ein-
Knopf-Bedienung und
Breitenverstellung

Ergonomischer Sitzkomfort mit
abnehmbaren Sitzelementen und
Schnappverschlusssystem für eine
einfache Reinigung

Das seitliche Display zeigt **übersichtliche Status- und Fehlercodes für eine schnelle Diagnose** an, darunter Störungen am Antrieb, Kabelfehler, einen niedrigen Akkuladestand oder die Aktivierung der Notabsenkung. LED-Anzeigen signalisieren Stromunterbrechungen, die Aktivierung des Not-Aus-Schalters und die Betätigung von Bedientasten und gewährleisten so einen sicheren und zuverlässigen Betrieb



Technische Daten

Gesamtlänge des Grundgestells	121 cm
Gesamtbreite des Grundgestells	84 cm
Wenderadius	140 cm
Neigungswinkel	0 bis 30 Grad nach hinten, 10 Grad nach vorne
Betriebsspannung	24 V
Batteriekapazität	7 Ah
Ladegerät (Mascot 3743)	110 – 240 V AC, 50 – 60Hz, max. 0.35 A, Kabellänge 1.5 m
Kopf-/Nackenstütze tiefen- und höhenverstellbar	Tiefe: 7 cm; Höhe: 12 cm
Höhenverstellung der Fußstütze	8 cm

LFT5900-2026-01 DE



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.lopital.de
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-Mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Alle von Lopital hergestellten Hilfsmittel entsprechen den geltenden Normen für Medizinprodukte der Klasse I (MDR (EU) 2017/745).

Copyright ©2026 Lopital. All rights reserved.