

Reflex XL

Pflege stärken – mit Kraft und Präzision

5100 5950

Reflex XL Dusch-Toilettenstuhl

Der Reflex XL basiert auf dem bewährten Reflex-Konzept von Lopital und bietet mehr Platz, Komfort und individuelle Einstellmöglichkeiten für unterschiedlichste Anforderungen. Die elektrische Höhen- und Neigungsverstellung ermöglicht gleichmäßige, kontrollierte Bewegungen, verbessert die Arbeitsergonomie und gewährleistet zugleich eine sichere und komfortable Position der zu pflegenden Person. Das durchdachte Design unterstützt eine effiziente Körperpflege und erleichtert Toilettengänge, indem es klinische Funktionalität mit hoher Benutzerfreundlichkeit im Pflegealltag verbindet.

Der Reflex XL wird aus hochwertigen Materialien gefertigt und präzise verarbeitet. Er bietet eine stabile, leicht zu reinigende Lösung, die sich nahtlos in professionelle Pflegeumgebungen einfügt. Der Stuhl wurde für die Anforderungen des täglichen Einsatzes entwickelt und überzeugt durch dauerhaften Komfort, intuitive Bedienung sowie den für Lopital charakteristischen Fokus auf die Sicherheit des Pflegepersonals und die Würde der zu pflegenden Person.

Ergonomische Bedienung. Ausgestattet mit ergonomischen Handgriffen und vier gebremsten Lenkrollen für einfaches Manövrieren, hohe Stabilität auf verschiedenen Untergründen und eine geringere Belastung der Gelenke der Pflegekräfte.

Zuverlässig & Langlebig. Entwickelt für den täglichen Pflegeeinsatz und abgesichert durch eine 60-monatige Garantie – für zuverlässige Leistung, auf die man sich verlassen kann.

Antibakteriell & Korrosionsbeständig. Die antibakterielle Beschichtung auf Basis von Silberionen unterstützt die Hygiene und Infektionsprävention, während das korrosionsbeständige Gestell mit glatten Oberflächen für Langlebigkeit und eine einfache Reinigung sorgt.

Unterstützende Kippfunktion. Dank der negativen Sitzneigung bietet der Reflex XL eine effektive Aufstehunterstützung. Dies fördert die Selbstständigkeit des Klienten und reduziert gleichzeitig die körperliche Belastung der Pflegekraft.



Technische Daten

Max. Hebegewicht	227 kg
Produktgewicht	63 kg
Sitzbreite	57 – 67 cm
Sitztiefe	49 cm
Sitzhöhe (verstellbar)	47 – 85 cm




Geeignet für Menschen mit
mäßig eingeschränkter bis stark
eingeschränkter Mobilität



Entdecken Sie unsere Produkte in Aktion – mit den interaktiven Produktvideos auf unserer Website: www.lopital.de

5100 5950

Reflex XL Dusch-Toilettenstuhl

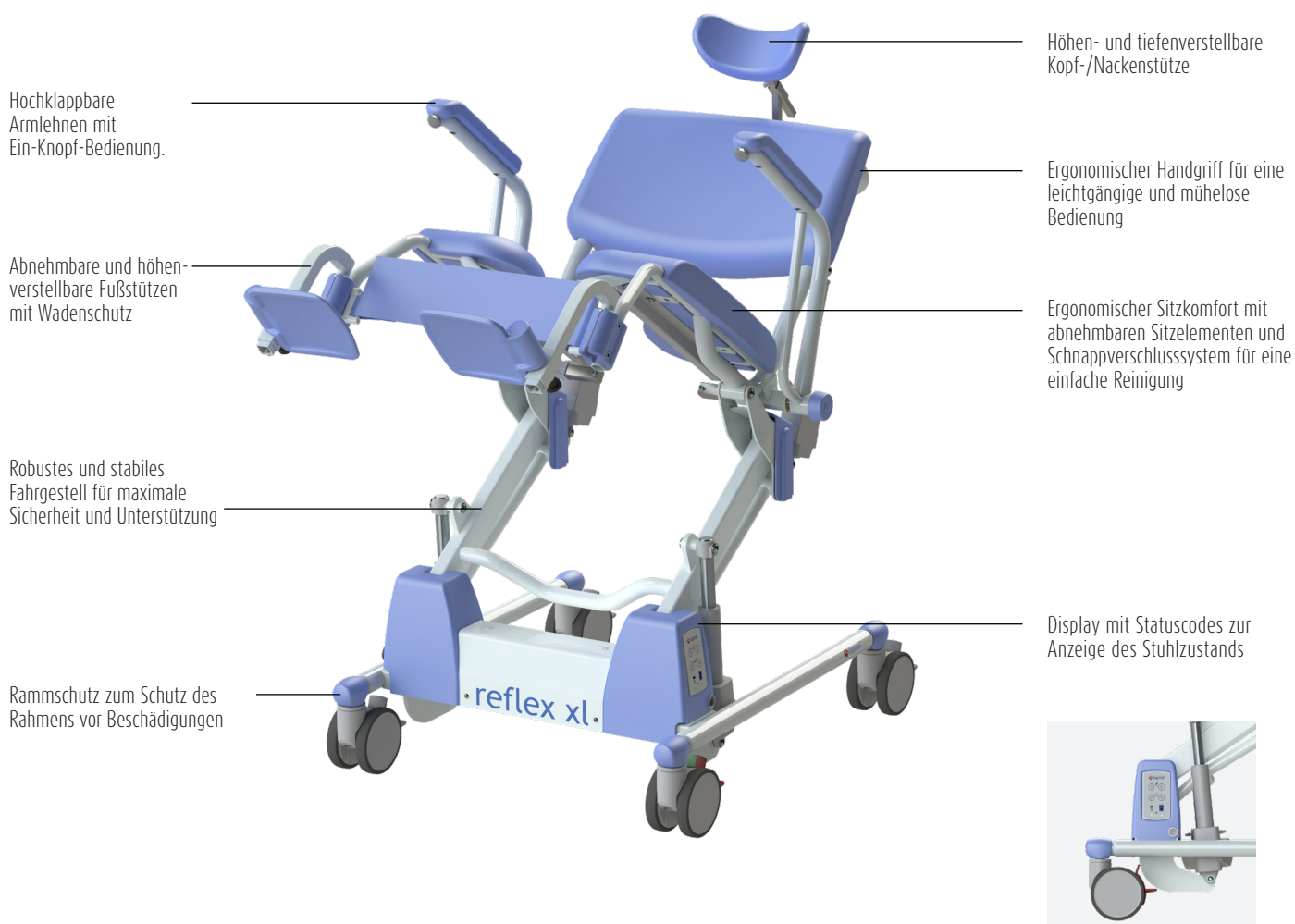

Optional

6960 8026
Komfort-Beinstützen-
Set abnehmbar und
verstellbar



Optionen

- 6950 1104 Bettpfanne mit Deckel Kunststoff
- 6960 8026 Komfort-Beinstützen-Set abnehmbar und verstellbar
- 7057 0508 Rad 125 Richtungsabhängig

Technische Daten

Gesamtlänge des Grundgestells	117 cm
Gesamtbreite des Grundgestells	74 cm
Wenderadius	132 cm
Neigungswinkel	0 bis 30 Grad nach hinten, 10 Grad nach vorne
Betriebsspannung	24 V
Batteriekapazität	7 Ah
Ladegerät (Mascot 3743)	110 – 240 V AC, 50 – 60Hz, max. 0.35 A, Kabellänge 1.5 m
Kopf-/Nackenstütze tiefen- und höhenverstellbar	Tiefe: 7 cm; Höhe: 12 cm
Höhenverstellung der Fußstütze	8 cm

LFT5950-2026-01 DE



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.lopital.de
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-Mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001

MADE IN
THE NETHERLANDS



Scan for
information

Alle von Lopital hergestellten Hilfsmittel entsprechen den geltenden Normen für Medizinprodukte der Klasse I (MDR (EU) 2017/745).

Copyright ©2026 Lopital. All rights reserved.